

乳房治療用器械

Teat treatment instruments

Aチューブ (滅菌済)	A-tube indwelling teat cannula, sterilized	146
導乳管 N 中	Milking tube N, Metal	146
乳頭切開器 SI式	Teat slitter, SI type	147
乳頭鋭匙	Tissues scraper for clogged teat	147
乳頭套管針	Teat trocar	148
乳房炎治療用ペニシリン針	Teat injection cannula for penicillin	148
乳房炎治療管	Infusion catheter for teat disease	149
サブヒール ジョイナー付	Teat protection ring Sub-heel	149

◆動物用一般医療機器

Aチューブ (滅菌済)

A-tube indwelling teat cannula, sterilized

牛の各種乳頭病変の排乳障害（乳頭口狭窄、乳漏等）の治療に使用します。


衛生的で、挿入棒を使用することで容易に挿入ができます。

電子線滅菌されておりますので単回使用です。

For treatment of milking disorder (stenosis, milk leakage etc.).

Hygienic and easy to insert the tube with enclosed stick.

Sterilized by electron beam irradiation. For single use.

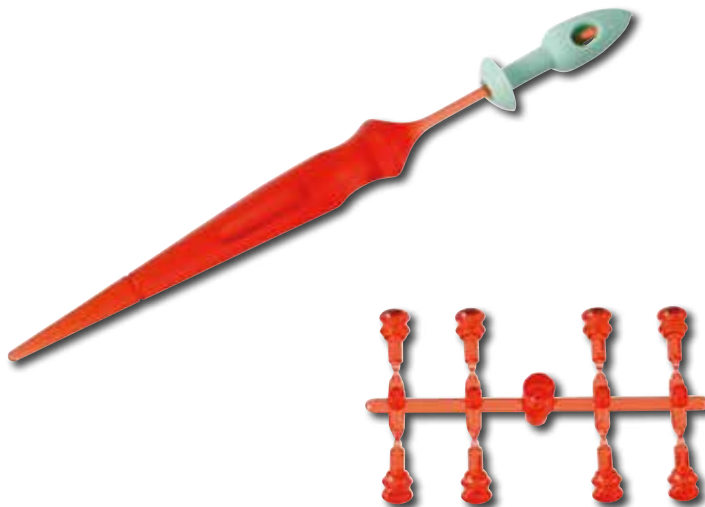

コード番号 Code No.	09019300
構成 Composition	Aチューブ 差込栓×24 カバー 挿入棒 A tube Insertion plug×24 A tube cover Insertion stick
材質 Material	Aチューブ:シリコン 差込栓:ポリカーボネート カバー:ポリエチレン 挿入棒:ポリカーボネート A tube:Silicon Insertion plug:Polycarbonate A tube cover:Polyethylene Insertion stick:Polycarbonate

◆動物用一般医療機器

導乳管 N 中

Milking tube N, Metal

牛の各種乳頭病変の排乳障害等の治療に使用します。

挿入部先端に孔が2カ所、基部に埋没防止のツバがついています。

For treatment of milking disorder.

There are 2 holes on the point edge. A brim prevents the tube being buried in teat.



コード番号 Code No.	09012400
型式 Type	中 Medium
入数 Contents	10本 10pcs
サイズ Size	φ3×72mm
材質 Material	ステンレス SUS

◆動物用一般医療機器

乳頭切開器 SI式

Teat slitter, SI type

乳管狭窄、乳頭硬化、乳管炎等の治療時に乳管内の肥厚部組織を取り除きます。

Remove intramammal thickened tissues in the case of lactiferous duct stenosis, galactophoritis, etc.

コード番号 Code No.	09025000
サイズ Size	φ4×158mm (挿入部:90mm) φ4×158mm (Insert length:90mm)
刃長 Blade length	10mm
質量 Weight	15g
材質 Material	刃部:ステンレス 本体:黄銅、メッキ Blade:SUS Main part:Brass, plated



◆動物用一般医療機器

乳頭鋭匙

Tissues scraper for clogged teat

乳頭狭窄時に乳頭管内膜の肥厚部組織、付着している異物等の除去を先端匙部で除去します。

Remove the thickened tissue or adhering substance in case of clogged teat.



コード番号 Code No.	09028000	09029000
型式 Type	大 Large	小 Small
サイズ Size	販売中止	160mm (挿入部:125mm) 160mm (Insert length:125mm)
匙部幅 Tip width	3mm	2.5mm
質量 Weight	19g	18g
材質 Material		挿入部:ステンレス 柄:黄銅、メッキ Insert part:SUS Grip:Brass, plated

◆動物用一般医療機器

乳頭套管針

Teat trocar

乳頭管内膜が癒着、閉鎖して鋭匙の挿入が困難な場合に、乳頭管中央部を穿刺して拡張します。

When it is difficult to insert the scraper due to adhesion of intramammal tissue, pierce and enhance the route by this trocar.



コード番号 Code No.	09030000
サイズ Size	套管部：φ2×135mm 穿刺部：φ1.5×160mm Outer cylinder：φ2×135mm Needle：φ1.5×160mm
挿入部 Insert length	105mm (刃長：14mm) 105mm (Blade：14mm)
質量 Weight	20g
材質 Material	柄：黄銅、メッキ 外筒、穿刺部：ステンレス Grip：Brass, plated Outer cylinder, Needle：SUS

◆動物用一般医療機器

乳房炎治療用ペニシリン針

Teat injection cannula for penicillin

乳房炎治療用の抗生物質、治療薬液を乳管内に注射注入する場合に使用します。

For injection of antibiotics, liquid medicine for teat treatment.



コード番号 Code No.	09034000
型式 Type	細 10基 Small 10Base
入数 Contents	12本 1dozen
サイズ Size	φ2×55mm
材質 Material	黄銅、メッキ Brass, plated

◆動物用一般医療機器

乳房炎治療管

Infusion catheter for teat disease

乳頭口の狭窄時、乳漏等に使用します。
注射筒10先、ゴム管等を接続して薬液、油剤等を注入できます。

For treatment of lactiferous duct stenosis, milk leakage, etc. Connect with syringe (point 10), rubber tube, etc. for administration of liquid medicine.



コード番号 Code No.	09035000
型式 Type	太 Large
サイズ Size	φ3×60mm
材質 Material	黄銅、メッキ Brass, plated

サブヒール ジョイナー付

Teat protection ring Sub-heel

乳牛の乳房踏傷防止のため、左右後脚に取りつけて使用します。
分娩後約10日から泌乳期2~3カ月まで装着することをお勧めします。

For prevention of damaging teat by stepping on it.
To be installed in both hind legs.
Recommended to use from 10days to 2-3months after delivery.



コード番号 Code No.	09043000
構成 Composition	本体×2 ジョイナー×8 Main part×2 Joiner×8
サイズ Size (Outside.Innerside.Thickness)	φ190×φ80×23mm
質量 Weight	約100g 100g approx.
材質 Material	ポリウレタン Polyurethane