

豚精液の濁度から密度を推定！！

精子密度計 豚用Ⅲ

採取した豚の精液をそのままの状態
で測定できます※人工授精に使用する際
の精子密度と容器サイズを入力すると、
希釈液量とボトル本数を自動計算します。

※精液の濁度から精子密度を推定する機器です。
精子数を直接計測する方法ではありません。

※活力の夏/冬の変化は条件を入力することで、より正確な計算が
できます。活力は自動計算できません。



付属品




ホルダー




本体ホルダー
挿入部用キャップ



キャピラリー
100本入

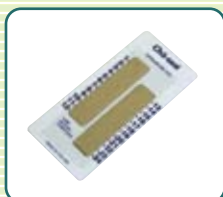

シーラント

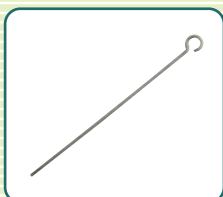

掃除棒



ACアダプター

◎取扱説明書

商品構成		
標準付属品	ホルダー	1個
	本体ホルダー挿入部キャップ	1個
	キャピラリー 100 μ L	100本
	シーラント	1枚
	掃除棒 ϕ 1.5	1本
	(専用)ACアダプター	1台
	取扱説明書	
消耗品(別売)	キャピラリー 100 μ L	100本
	シーラント	1枚
	本体ホルダー挿入部用キャップ	1個
オプション	プリンター	

基本仕様	
光学系	光学系：ダブルビーム側光
	光源：3色LED
	受光素子：シリコンフォトダイオード
本体	セル：ホルダー/キャピラリーチューブ
	液晶表示：16桁4行
	電源：ACアダプター(付属品) または電池(単三乾電池4本)
測定	寸法/質量：W190×D138×H46mm/580g
	検量線内蔵固定型
	希釈液量：ボトル本数の自動計算
外部出力	プリンター出力用コネクター 9ピンオス
	PC用コネクター 9ピンメス



FHK 富士平工業株式会社
 〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号
 TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663
 URL/http://www.fujihira.co.jp
 北海道富士平工業株式会社
 〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号
 TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406
 帯広支店〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号
 TEL(0155)58-1811 FAX(0155)58-1815